

# Veterinární močový analyzátor



## thinka RT-4010

**thinka** Nový veterinární močový analyzátor pro psy a kočky

**thinka** Doba testu 1 minuta

**thinka** Odpojitelná tiskárna

**thinka** Vzorový výtisk:

**thinka** Cena:  
přístroj  
15 000,-Kč

strip  
12,-Kč

ceny jsou bez DPH.



### Měřené parametry

thinka Urine Test Strip 10UB

| GLU | PRO | ALB | BIL | CRE | pH | BLD | KET | NIT | LEU |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●  | ●   | ●   | ●   | ●*  |


\* jen pro psy

**thinka** + parametr UPC pomocí stejného stripu

### Co je parametr UPC?

**thinka** Automaticky také měří poměr bílkoviny a kreatininu v moči (UPC-Urine Protein Creatinin Ratio) pro detekci přítomnosti bílkoviny v moči (proteinurie) a tím je schopen detekovat poškození ledvin v jeho velmi raném stadiu.

**thinka** Screening proteinurie je možný bez ohledu na koncentraci nebo naředění moči. Vliv naředění se eliminuje vztažením na hodnotu kreatininu, neboť denní vylučování kreatininu je pro dané zvíře konstantní.

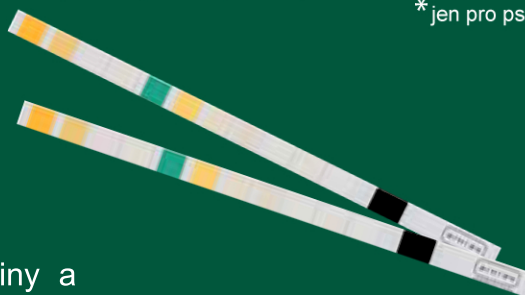

| UPC value    |              | Substage                    |
|--------------|--------------|-----------------------------|
| Canine (Dog) | Feline (Cat) |                             |
| < 0.2        | < 0.2        | Non-proteinuric (NP)        |
| 0.2 to 0.5   | 0.2 to 0.4   | Borderline proteinuric (BP) |
| > 0.5        | > 0.4        | Proteinuric (P)             |