




Osmo Station OM-6050

- plně automatický osmometr, založený na principu měření teploty bodu tuhnutí kapaliny (Ultra Super Cooling Method)

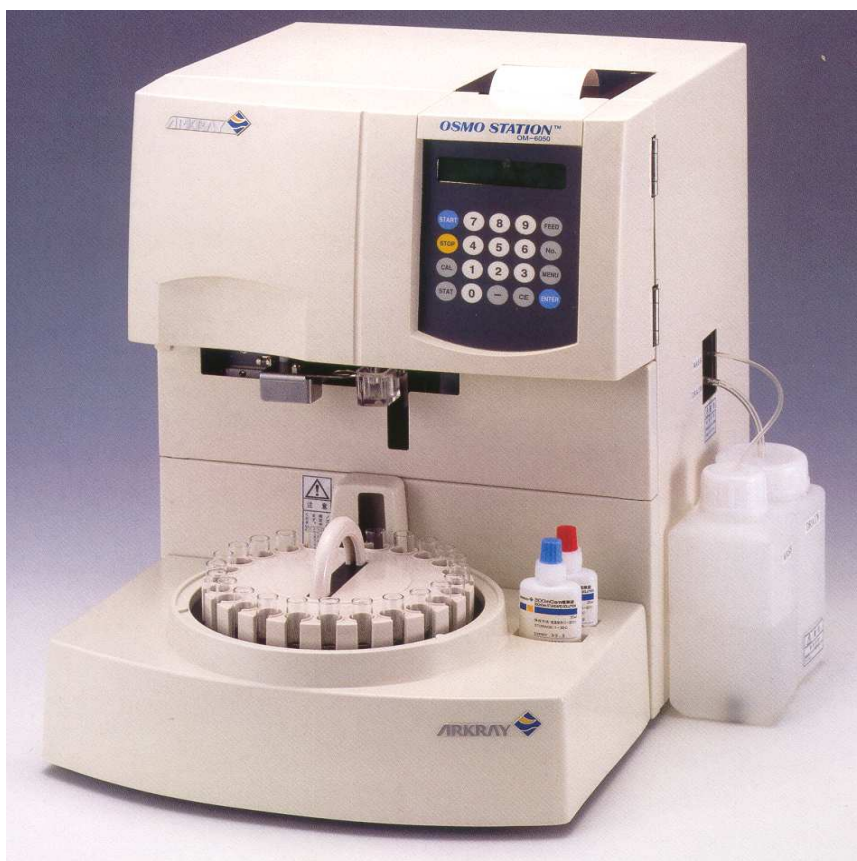

- vysoká přesnost měření (CV < 1%); velmi tichý provoz
- doba měření jednoho vzorku: 2-3 minuty; minimální množství vzorku: 200ul
- zásobník na 24 vzorků + "STAT PORT" pro měření statimových vzorků
- možnost používání standardních zkumavek = nízké provozní náklady
- tří- nebo dvoubodová kalibrace umožňuje velmi široké použití přístroje
- rozsah měření: 0 – 2500 mOsm
- integrovaná termotiskárna a čtečka čárového kódu
- paměť na 200 výsledků
- externí výstup RS-232, možnost napojení na všechny LIS
- rozměry: 320mm(šířka), 465mm(hloubka), 435mm(výška), váha cca. 30 kg