

To nejlepší pro vašeho pacienta



 ComfortLine²


www.therapychair.com

ComfortLine2 – nová dimenze bezpečnosti



Svislá poloha pro usazení a zesednutí se aktivuje jedním předprogramovaným tlačítkem



Loketní opěrku lze nastavit do požadované polohy anebo ji i zcela otočit pomocí jedné páky

Křeslo ComfortLine2 kombinuje nejnovější hygienické standardy se zkušenostmi a známými technickými vlastnostmi. Hladké a kompaktní povrchy usnadňují čištění, doplňují dizajn a podtrhují vysoký standard kvality. Krásný vzhled a vysoký komfort jsou podpořeny i sofistikovanou technologií čalounění.

K dispozici je vysoce rezistentní, antibakteriální a antimikrobiální materiál čalounění a vyhotovení v jednobarevných nebo dvoubarevných kombinacích. Celá barevná škála je dostupná na vyžádání.



Otáčení loketní opěrky a skllopení přední části pro ideální polohu odběru je jednoduché a intuitivní pomocí nastavovací páky.



Přístup k pěti motorům je umístěn přímo pod odnímatelným čalouněním.

Atoll

Royal

Orchidee

Cyclame

Kirsche

Karneol

Mint

Chrom
(Standard)

dizajn a komfort



Pro optimální relax nabízí křeslo ComfortLine2 individuální nastavení všech segmentů.



Extra široký nožní pedal aktivuje šokovou pozici a tím umožňuje lékařskému týmu práci s okamžitě volnými rukama.



Váš pacient si může snadno nastavit výšku a optimální polohu polštáře pomocí jedné ruky.



Podsvícený ruční ovladač je jasný a jednoduchý. Nastavení křesla do svislé polohy je možné pomocí jediného tlačítka.



Šoková pozice může být aktivována z obou stran křesla pomocí širokého nožního pedálu.



Kompletně uzavřený segment na nohy s elektricky nastavitelnou opěrkou nohou nabízí vysoký hygienický standard.




Centrální brzda na obou stranách umožňuje rychlou fixaci všech čtyř kol.



Uzemnění dle EN 60601 zabezpečuje maximální bezpečí vašeho pacienta.

Doplňkové vybavení ke ComfortLine2

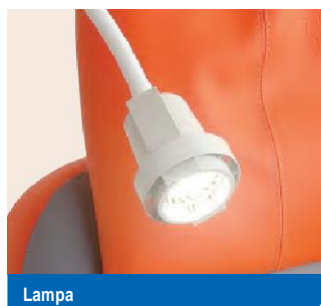

Lampa



Úchyt



Prostor na zavazadlo



Stolek




Držák na infuzi



Pacientský stolek



Kryt

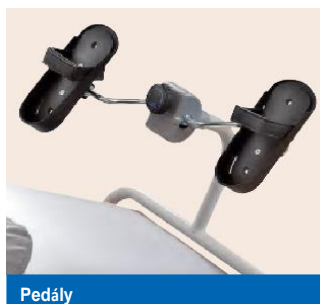

Pedály



USBport



Držák na pap. rolnu

Technická data

Rozměry

Šířka včetně opěrek rukou	90 cm
Šířka sedadla	58 cm
Celková délka	203 – 230 cm
Opěrky rukou	52 x 15,5 cm
Celková váha	101 kg

Nastavení

Úhel zádového segmentu	75° – 0°
Úhel sedadlového segmentu	30° – 5°
Úhel nožního segmentu	5° – 30°
Opěrka nohou, elektrická	28 cm
Nastavení výšky	54 – 74 cm

Elektrická specifikace

Napájení / napětí	100 – 240 Volt, 50/60 Hz
Třída ochrany	II
Kategorie ochrany	IPX 4
Motory	5
Operační napětí akum. (volitelné)	25,2 Volt
Kapacita akum. (volitelné)	1800 mAh

Bezpečnost

Maximální váha	240 kg
----------------	--------

Vyobrazené křeslo obsahuje i volitelné doplňky, které nejsou součástí standardní verze. Standardní design křesla je jednobarevná chromová šedá.



Bionic Medizintechnik GmbH ... a JMS-corporation · Max-Planck-Straße 21 · D-61381 Friedrichsdorf/Germany
Telefon: +49(0)6172-75760 · Fax: +49(0)6172-757610 · info@bionic-jms.com · www.bionic-jms.com