


## Adams A1c HA-8180V



\*\*\*\* HA-80VP T01.15+\*\*\*\*  
 2009-09-13 21:22  
 測定番号 0009 示し番号 0008  
 ID -----0009

HbA1c 9.5 %  
 HbF 10.7 %

|     | 秒      | 面積    | %    |
|-----|--------|-------|------|
| P1  | 5      | 4151  | 17.8 |
| P2  | F 10   | 3873  | 10.7 |
| P3  | A1c 20 | 2215  | 9.5  |
| P4  | A0 37  | 16956 | 72.7 |
| P5  | S 44   | 4054  | 11.2 |
| P6  | 57     | 362   | 1.0  |
| P7  | C 66   | 4590  | 12.6 |
| 総面積 |        | 36201 |      |

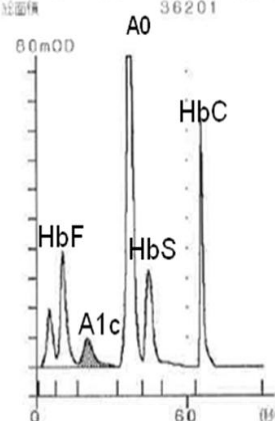

- doba měření jednoho vzorku je 90 s. (48 s. ve Fast Mode), snadné přepínání mezi oběma módy
- podavač na 100 vzorků, statimový port, “cap-piercing“ systém, měření z primárních zkumavek nebo keřů, potřebné množství vzorku 4ul (plná krev nebo hemolýzát)
- měřené parametry: HbA1C, HbF (Fast Mode) plus HbA1 a frakce Hb (Variant Mode)
- bez interferencí HbAS, HbAC a HbF, HbAE, HbAD a HbAJ interferují, nicméně dávají abnormální chromatogram
- automatická kalibrace, promíchání vzorku před měřením
- výborná přesnost – CV 0,5%
- integrovaná termotiskárna a čtečka čárových kódů, paměť na 500 výsledků, barevný LCD displej, možnost napojení na LIS
- zobrazení stavu spotřebních roztoků, jejich šarže a expirace, tichý chod, servisní autodiagnostika
- snadná údržba a výměna spotřebního materiálu – pre-filter integrovaný do kolony
- rozměry: 530 x 530 x 530mm, váha 42 kg

**VELMI EKONOMICKÝ PROVOZ**